

Prowadzone przez NHS badania przesiewowe na obecność nowotworu jelit




Niniejsza ulotka wyjaśnia jak prawidłowo użyć zestawu diagnostycznego.

Prosimy uważnie przeczytać.

W swoim zestawie znajdziesz:

- Opłaconą kopertę zwrotną
- 6 kartonowych szpatulek
- Pomarańczowo-biały kartonowy zestaw diagnostyczny

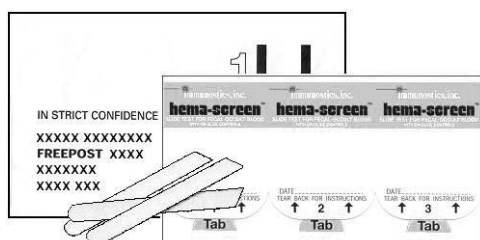

Uwaga:

Nie otwarty, Twój zestaw zachowa ważność przez wiele miesięcy. Musimy jednak otrzymać ukończony test do analizy w **ciągu 14 dni** od pobrania pierwszej próbki.

Uwaga! Nie analizujemy próbek w weekendy

1. Zanim przeprowadzisz test

Zanim usiądziesz na sedes, przygotuj zestaw diagnostyczny: wyjmij swój zestaw z koperty i przygotuj sobie dwie kartonowe szpatułki.



Aby zapewnić czystość próbki a tym samym prawidłowość wyniku analizy, nie otwieraj strony oznaczonej napisem 'DO NOT OPEN'.



Zestaw składa się z 3 części, na 3 oddzielne wypróżnienia.

Za każdym razem otwórz tylko jedną klapkę.

Nie rozdzielaj 3 części.

2. Przeprowadzenie testu


Zanotuj datę na klapce nr.1 w okienku znajdującym się na stronie z wydrukowanym Twoim nazwiskiem.



- Odklej klapkę nr.1.
- Zauważysz dwa małe okienka przeznaczone na Twoje próbki.
- Miej zestaw diagnostyczny i szpatułki pod ręką.

3. Pobranie pierwszej próbki

- Uwaga! Próbkę należy pobrać z kału, który nie znajdował się w misce klozetowej – może to wpłynąć na jakość wyniku analizy. Oto kilka sposobów przejścia próbki:
 - Złożony fragment papieru toaletowego
 - Dłoń zabezpieczona plastikową torbą
 - Czysty pojemnik jednorazowego użytku
- Przy pomocy kartonowej szpatułki pobierz mały fragment pobranego kału. Rozsmaruj cienko w pierwszym okienku.

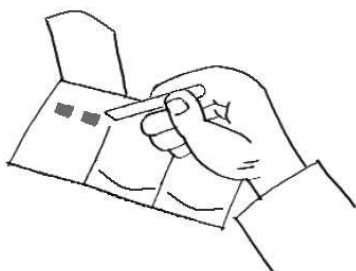

- Przy pomocy drugiej szpatułki pobierz następną próbkę z innej części kału. Rozsmaruj cienko w drugim okienku.

4. Po pobraniu próbki

- Należy wytrzeć szpatułki w papier toaletowy, zapakować i wyrzucić do śmietnika na zewnątrz. **Nie należy** spuszczać kartonowych szpatulek w toalecie.
- Zamknij klapkę i wsuń pod pomarańczowy pasek.
- **Nie przechowuj** zestawu w ciepłym miejscu ani w słońcu – może się uszkodzić. Umyj ręce po użyciu.

5. Pobranie drugiej próbki

- Zanotuj datę na klapce 2.
- Powtórz test używając dwóch okienek pod klapką 2.

6. Pobranie trzeciej próbki

- Zanotuj datę na klapce 3.
- Powtórz test używając dwóch okienek pod klapką 3.

Uwaga: Nie trzeba pobierać próbek z trzech wypróżnień pod rząd, ale należy je pobrać z trzech różnych wypróżnień.

Lista kontrolna

Czy umieściłeś próbki w sześciu okienkach?

Czy zanotowałeś datę na trzech klapkach?

Czy zestaw dotrze do laboratorium **w ciągu 14 dni** od pobrania pierwszej próbki?

Jeśli na którekolwiek pytanie z listy kontrolnej odpowiedź brzmi NIE, prosimy skontaktować się z bazą badań przesiewowych po poradę, dzwoniąc pod nieodpłatny numer: 0800 707 60 60.

Jeśli możesz odpowiedzieć TAK na wszystkie pytania listy kontrolnej, umieść zestaw w załączonej kopercie zwrotnej, zaklej ją i wyślij pocztą. Koperta spełnia wymagania poczty i można ją bezpiecznie wysłać. Prosimy się jednak upewnić, że jest czysta. Ma to na celu ochronę pracowników poczty.

Czy masz jakieś pytania?

Zadzwoń do bazy badań przesiewowych pod nieodpłatny numer **0800 707 60 60**

Wszystkie rozmowy są ściśle poufne.

Prosimy nie czuć zażenowania – odpowiemy na Twoje pytania i udzielimy porady. Nasi pracownicy są na Twoje usługi.



Pamiętaj:

Przechowuj swój zestaw diagnostyczny z daleka od słońca czy źródła ciepła